

## PHYSIOSON - *Basic*

### DAS KOSTENGÜNSTIGE TRAGBARE ULTRASCHALLGERÄT

- 1 MHz Ultraschall, kontinuierliche und gepulste Schallabgabe (4 Tastverhältnisse)
- optische und akustische Kopplungskontrolle
- umfangreicher Indikations-Index
- 20 individuelle Programmspeicher
- erhältlich als Akku- oder Netzgerät



**PHYSIOMED**<sup>®</sup>  
ELEKTROMEDIZIN

**PHYSIOSON-Basic – das kostengünstige, tragbare Ultraschall-Therapiegerät mit Indikations-Index und Individuellen Programmspeichern...**

- **LCD Display** für gute Übersicht und die bewährte **PHYSIOMED Einknopf-Bedienung** für maximalen Bedienkomfort.
- **Behandlungs-Köpfe:** Die ergonomischen, wasserdichten Behandlungsköpfe mit **biokompatibler Titan-Schallfläche** bieten höchstmögliche Sicherheit in der Leistungsabgabe und verhindern allergische Reaktionen.
- **Leistungsabgabe:** Kontinuierlich und gepulst (4 Tastverhältnisse).
- **Kopplungskontrolle:** optisch an Gerät und Behandlungskopf, sowie akustisch.
- **Umfangreicher Indikations-Index** zum Therapieeinstieg über eine alphabetisch geordnete Indikationsliste mit automatischem Aufruf eines Behandlungsprogramms inklusive Dosierungsvorschlag und Graphik des Behandlungsgebietes.
- **Individuelle Programmspeicher:** 20 individuell einstellbare und schnell abrufbare Programmspeicher für oft verwendete Behandlungsprogramme.
- Zur **Simultantherapie** geeignet (mit zusätzlichem Reizstromgerät).
- **Erhältlich in zwei Versionen:** als Netzgerät oder als Akkugerät.
- **Stabiles Metallgehäuse** mit Schutz-Tragegriff für den mobilen Einsatz.



**TECHNISCHE DATEN**

<b>Ultraschall-Frequenz</b>	1 MHz
<b>Leistungsabgabe max</b>	3W/cm <sup>2</sup>
<b>Leistungsaufnahme</b>	60 VA
<b>Nennspannung</b>	230 V +/- 10%
<b>Schutzklasse</b>	1, Typ BF
<b>Maße</b>	315 x 104 x 285 mm <sup>3</sup>
<b>Gewicht</b>	2,2 kg (Netzgerät) 3,1 kg (Akkugerät)

**ZUBEHÖR (STANDARD FÜR AKKUGERÄT):**

- 1 Behandlungskopf, wahlweise 5 cm<sup>2</sup> (ERA 4 cm<sup>2</sup>) oder 2,5 cm<sup>2</sup> (ERA 2,5 cm<sup>2</sup>)
- 1 Transporttasche
- 1 Netzkabel
- 1 Flasche Ultraschall-Gel, 250 ml
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Therapieheft Ultraschall

**ZUBEHÖR (STANDARD FÜR NETZGERÄT):**

- 1 Behandlungskopf, wahlweise 5 cm<sup>2</sup> (ERA 4 cm<sup>2</sup>) oder 2,5 cm<sup>2</sup> (ERA 2,5 cm<sup>2</sup>)
- 1 Netzkabel
- 1 Flasche Ultraschall-Gel, 250 ml
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Therapieheft Ultraschall

**SONDERZUBEHÖR:**


- 1 zusätzlicher Behandlungskopf, wahlweise 5 cm<sup>2</sup> (ERA 4 cm<sup>2</sup>) oder 2,5 cm<sup>2</sup> (ERA 2,5 cm<sup>2</sup>)
- 1 zusätzlicher Behandlungskopf-Halter

**WEITERES ZUBEHÖR:**

Siehe Zubehör-Liste

PHYSIOMED Geräte entsprechen den neuesten Sicherheitsnormen und den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes, werden nach aktuellen Standards der Qualitätssicherung gefertigt, sind baumustergeprüft und tragen das amtliche CE-Zeichen gemäß Richtlinie 93/42.

**ISO 9001**

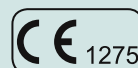

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGY FOR THERAPY

**PraxiMed**<sup>®</sup>

www.praximed.com  
shop@praximed24.eu  
Fax 037754-2393

**PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG**  
Hutweide 10  
D-91220 Schnaittach/Laipersdorf  
Germany

**Tel.:** +49(0)91-26/25 87-0  
**Fax:** +49(0)91-26/25 87-25  
**E-mail:** info@physiomed.de  
**Web:** www.physiomed.de